


자동 백업 설정 방법 안내

매일 특정 시간에 진료기록이 자동으로 백업되도록 설정하는 방법을 안내드립니다.

- 1 서버PC에서 바탕화면의 의사랑 백업 아이콘을 실행하거나 아래 경로에서 백업 프로그램을 실행합니다.

(● 경로: YSR2000WExeWTBackup.exe)

- 2 백업 경로 설정

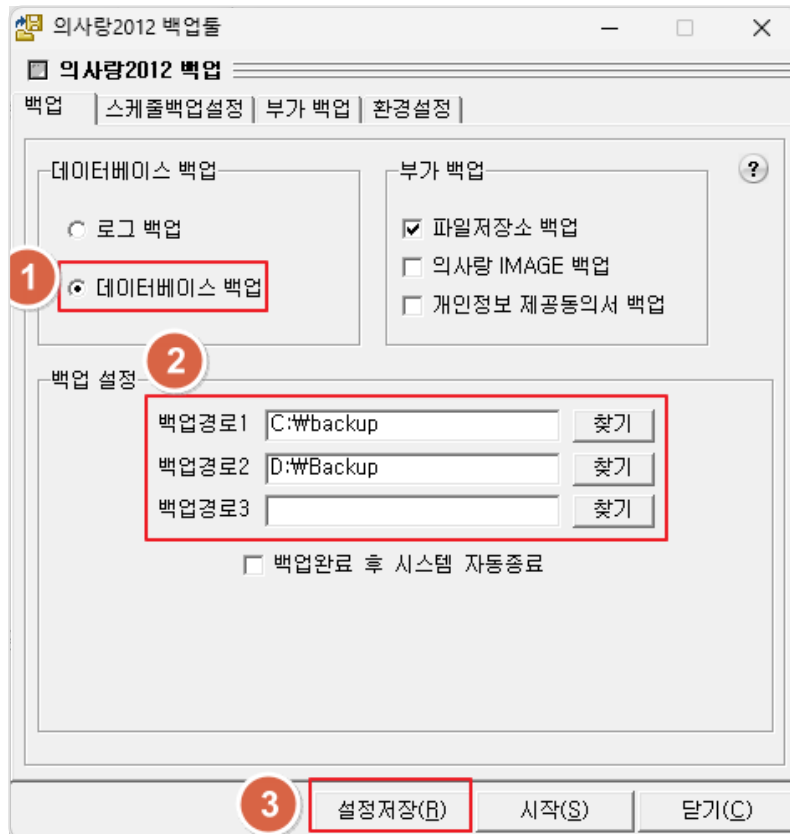


① 데이터베이스 백업 항목을 체크합니다.

② 백업경로1, 백업경로2를 화면 예시와 같이 설정합니다. 백업경로3에 외장하드 경로를 추가하는 것도 권장드립니다. (단, 경로를 많이 설정할수록 백업 완료 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.)

③ 설정저장 버튼을 클릭하여 경로 설정을 완료합니다.

- 3 스케줄 백업 설정

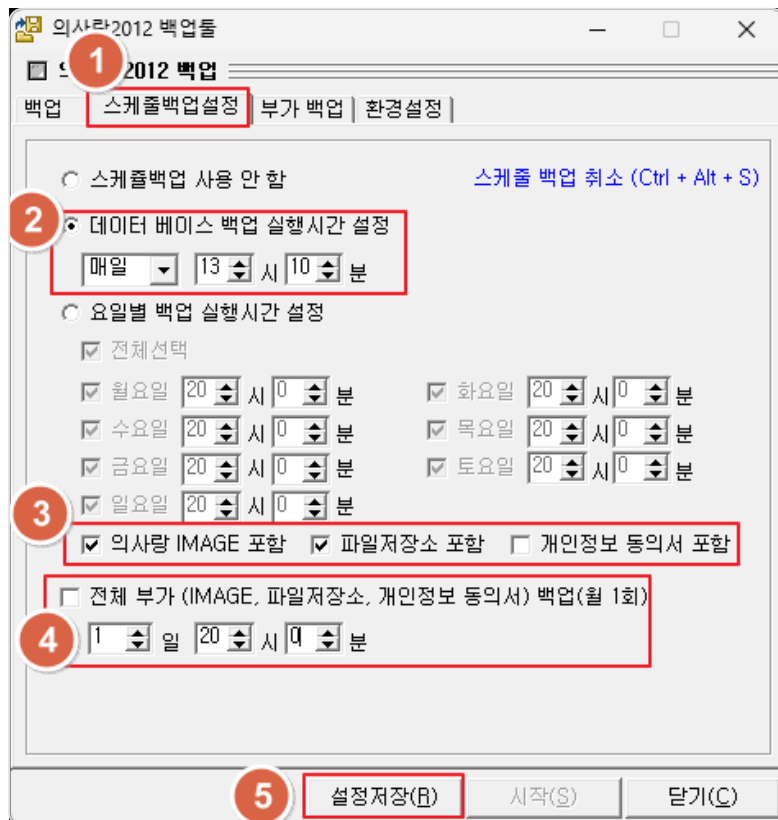

① 스케줄백업 탭을 클릭합니다.

② 데이터베이스 백업 실행시간 설정 항목에 체크한 후, 매일 자동으로 백업을 진행할 시간을 설정합니다.

※ 자동백업 실행 시 의사랑 프로그램 속도가 일시적으로 느려질 수 있으므로, 진료시간이 아닌 시간(예:점심시간)으로 설정하시기 바랍니다.

③ 필요 시 의사랑 IMAGE, 파일저장소, 개인정보 동의서 포함 항목을 체크합니다.

④ 필요 시 전체 부가 백업(월 1회)을 설정합니다.

- 전체 부가 백업은 1시간 이상 소요될 수 있으므로, 데이터베이스 백업 시간과 겹치지 않는 여유 있는 시간으로 설정하시기 바랍니다.

⑤ 설정저장 버튼을 클릭하여 자동 백업 설정을 완료합니다.

※클라이언트 PC(예: 접수실PC)에서도 동일하게 자동 백업 설정이 가능하나, 동시에 백업이 실행되지 않도록 백업 실행 시간은 서로 다르게 설정해 주시기 바랍니다.